


ETO C 1445

HASTANE TİPİ ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON CİHAZI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ /DATASHEET

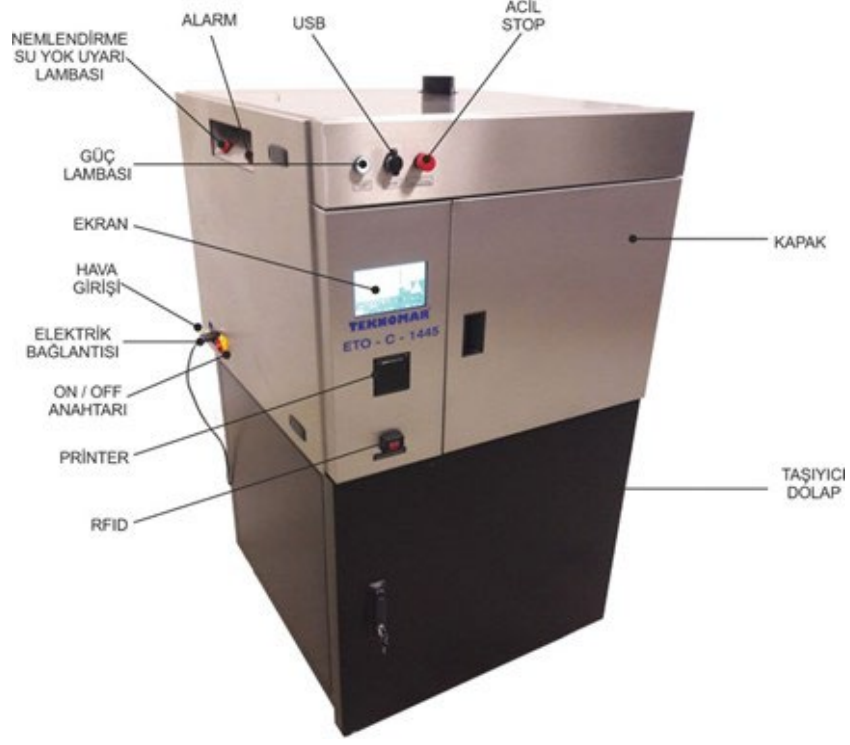

ETO C 1445 ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON CİHAZI KURULUM ŞARTLARI

Drenaj Sistemi:	Gerektirmez.
Egzoz Bağlantısı:	PVC Boru / Paslanmaz Boru
Gereken Optimum Harici Çalışma Hava Basıncı:	+4 / +13 veya +6 / +8 Bar Harici Hava
Cihaz Çalışma Ortamı Sıcaklığı / Nem:	Sıcaklık: 20 °C – 30 °C Bağıl Nem: %30- %80 Rh

ETO C 1445 ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ /DATASHEET	
Ürün Adı	Etilen Oksit Sterilizasyon Cihazı
Orjinal Ürün Kodu (P/N)	ETO C 1445
Ürünün Markası / Modeli	TEKNOMAR / ETO C 1445
Tipi (Masa Üstü, Dik, Blok)	Masa Üstü
Sınıfı	Class IIb
Ağırlığı (Kg)	208 Kg
Raf Sayısı ve Tepsisi Sayısı	2 Adet Paslanmaz Çelik
Cihaz İç ve Dış Ölçüleri	Cihaz Dış Ölçüleri 940(g) X 960(d) X 780(h) mm Kazan Ölçüsü 440(g) X 820(d) X 390(h) mm
Kapı Özelliği (Tek Kapı / Çift Kapı)	TEK KAPI
Kapının Çalışma Sistemi	Yarı Otomatik / Kilitli
Kazan Hacmi (Litre)	134 Lt Prizmatik Tip (Net Kullanılabilir Hacim)
Sterilizasyon Sıcaklık Aralığı	37-55 °C (±1 °C)
Çalışma Sistemi	Vakum Altı / -600mbar / Kartuşlu
Çalışma Şekli	Vakum, Nemlendirme, Sterilizasyon, Havalandırma
Vakum Şekli	Harici 6 Bar Hava ile Vakum Enjeksiyon Sistemi veya Vakum Pompası
Sterilizasyon Süresi	55 °C 3 Saat / 37 °C 5 Saat
Sterilizasyon Gazı/Kartuşu	%100 Etilen Oksit 100 gr Alüminyum Kartuş
Paslanmaz Çelik Kalitesi (Kazan, Ceket, Kapı, Dış Paneller V.S.)	Kapı 5083 Alüminyum veya Paslanmaz Çelik / Hazne 316 Paslanmaz Çelik / Kapak Kaplama 304 Paslanmaz Çelik / Dış Şase DKP Elektrostatik Boya
Printer Özelliği	Var, Termal Kağıt Rulo 57mm X 15m / 50mm/Sn
Menü Dili	Türkçe/İngilizce Menü Dili
Yükleme Boşaltma Özelliği	Manuel Yükleme / Boşaltma
Su Tüketimi Ve Bağlantıları	20 Sterilizasyon Başına 15cc Su / Harici Su Bağlantısı Yoktur
Nötralizasyon Sistemi	Su ile İşleme ve Etil Glikole Dönüştürme. Cihaz içinde sulu scrubber / abator mevcuttur.
Nominal Güç Tüketimi	Max 2,2 Kw / Döngü
Hava Yıkama Sayısı/Süresi	Min. 3, Max. 99 Adet /Süre Ayarlı
Yükleme Rafı ve Sepet Özellikleri	2 ADET PASLANMAZ ÇELİK YÜKLEME TEPSESİ BULUNMAKTADIR.TEPSİ BOYUTLARI 385 X 605 X 80 Mm
Ceket Özelliği ve İzolasyonu	İzolasyon Levhası (2,5 cm Kalınlık)
Sabit Program Sayısı	37 ve 55 °C olmak üzere 2 program / Ayrıca Ayarlanabilir Isı ve Süre Programları
Isı Sensörleri Özelliği	PT100

Şifre Koruma	Şifre Korumalı Yönetim Paneli
Yazılım	Orijinal PLC LEADER Yazılım
Güvenlik Uyarıları (Ekran Görseli Ve Sesli)	Gaz Yok Uyarısı (Kartuş yok /kartuş eksik) Su Yok Hava Yok Vakum Uyarısı Kapı Durum Kontrol Uyarısı Sterilizasyon Tamamlanamadı Sızıntı Testi Uyarısı
Elektronik Özellik	Plc + 14 Bit Analog Modül , 14 Input 10 Output
RS232 Ve Software Bağlantısı	RS232 Bağlantı
Kontrol Paneli Özellikleri (LCD/TouchScreen)	Renkli Lcd Dokunmatik Ekran Grafik Fonksiyon Görünümü
Conta Sistemi.	Etilenoksit Gazına Dayanımlı Silikon Kapak Contası / Kauçuk Conta
Kapı Kilit Sistemi	Mandallı, Güvenlikli Kilit Mekanizması
Bir Çevrimdeki EO Gaz Dozu (Ppm) /Tüketim Miktarı	740 Ppm (± 5)/ %100 EO'da 100gr Kartuş
Elektrik Bilgileri	220 V AC / 50 Hz Max 2.2 Kw
Korunma Sınıfı	Ip20
Barcode Okuyucu/RFID Entegre Edilebilme Özelliği	Var
Kalite Belgeleri	ISO 9001 ISO 13485 CE 1984 Yerli Malı Belgesi
Validasyon	Standart / Ayrıca Kullanıcı Tarafından Yapılmaktadır
Diğer Teknik Özellikler	EO Kartuş ve Tüp ile Çalışabilme / Uzaktan Kontrol ve Bağlanabilme / Hastane Donanımına Bağlanabilme Özelliğine Sahiptir.
Aksesuar (Opsiyonel)	Sepet Taşıma Arabası / Dolaplı Alt Masa